

EQUIPAMENTOS



Seladora Automática



Incubadora



Seladora Manual

A Investmar, empresa genuinamente brasileira, fundada em 1964, atua em diversos segmentos industriais ligados a saúde, especializando-se em embalagens descartáveis e produtos para a esterilização de material odonto-médico-hospitalar com a linha Medstéril.

Em conformidade absoluta com as normas nacionais e internacionais de padronização técnica (ISO, ABNT, ANVISA e Ministério da Saúde em consonância com as Boas Práticas de Fabricação).

Parque industrial e laboratórios com equipamentos de última geração ocupando lugar de destaque na indústria nacional, resultado de rígido padrão ético e profissional de trabalho.

Administrada por 3 gerações em total sintonia, tem o foco direcionado ao processo contínuo do desenvolvimento de seus profissionais, seu maior patrimônio, bem como de novos produtos e equipamentos.

Filosoficamente, o ideal da empresa pode assim ser sintetizado:

“ Nossa maior satisfação é contribuir para a manutenção da vida ”.



Tel.: +55 11 3672.5700


medsteril@medsteril.com.br

www.medsteril.com.br


Nossas embalagens são ecologicamente corretas. Temos compromisso com o meio ambiente e buscamos continuamente soluções para a redução dos resíduos das embalagens na indústria e em nossos clientes.



investmar
DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA.
DIVISÃO HOSPITALAR

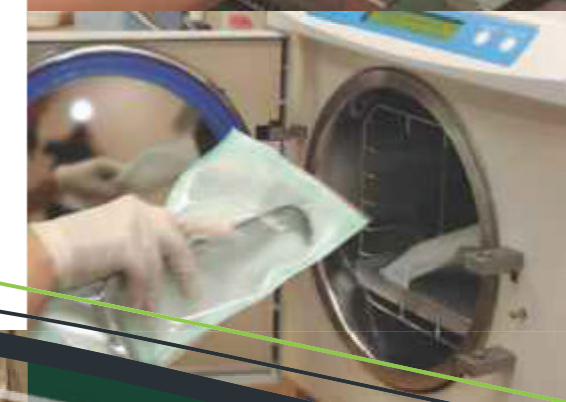

- Embalagens para Esterilização
- Eprodan
- Indicadores Biológicos
- Indicadores e Integradores Químicos classe 5 e 6
- Teste Bowie Dick
- Papel Crepado
- Seladoras Manuais e Automáticas
- Incubadoras

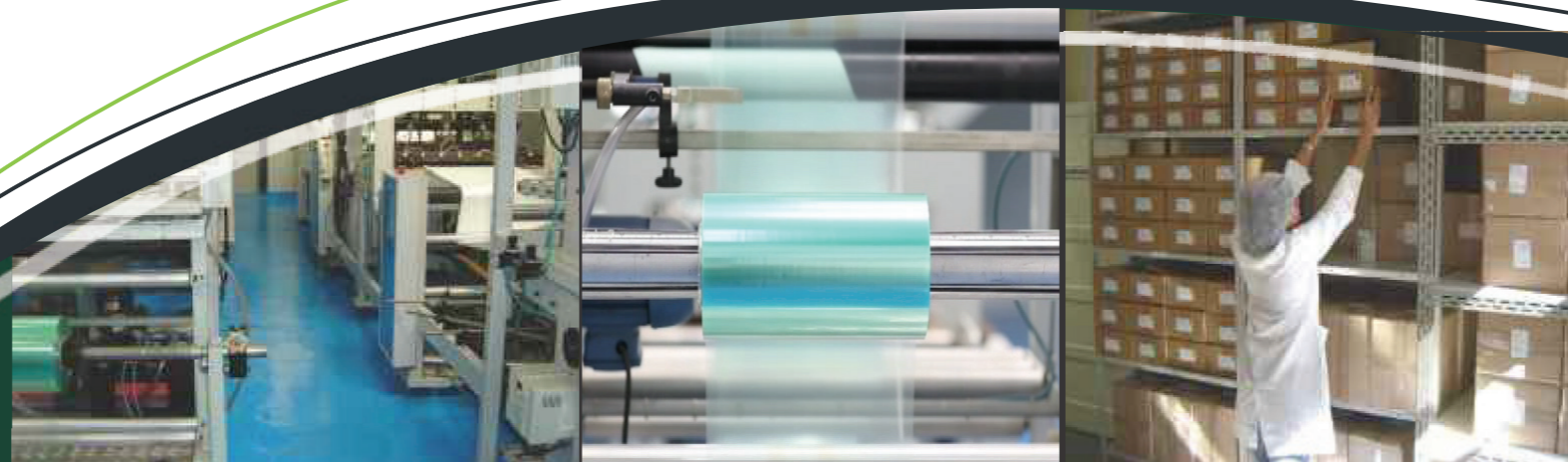

Empresa em conformidade com as boas práticas de fabricação

EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO

Embalagens ecologicamente corretas que obedecem rigorosamente aos padrões nacionais e internacionais de produção.

Papel com 60g/m² e 70g/m² e filme multicamadas apresentando:

- Selagem e design especiais, oferecendo total segurança;
- Indicadores para VAPOR, ETO e versão para FORMALDEÍDO;
- Filme multicamadas (4 camadas) com alta resistência às tensões de manipulação.

Apresentação: Rolos lisos e com pregas, envelopes termoselantes e envelopes autosselantes em vários tamanhos.

Abrange as áreas hospitalar, odontológica, podologia, estética e industrial.



BOBINAS



ENVELOPES

Embalagens de poliamida (nylon 60) para esterilização em autoclaves e estufas



BOBINAS EM NYLON

Papel Crepado para esterilização



TAMANHOS
FOLHAS PAPEL CREPADO
30x30cm
40x40cm
50x50cm
60x60cm
90x90cm
100x100cm
120x120cm

EMBALAGENS PARA DESINFECÇÃO



SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS

Sistema de barreira: usado para manter produtos desinfetados e secos, protegendo totalmente contra poeira, sujidades, umidade e materiais estranhos, proporcionando uma barreira durável e transparente, além de permitir uma fácil identificação do produto. A embalagem previne a recontaminação e contaminações cruzadas dos produtos desinfetados, pois mantém a qualidade do processo de desinfecção após o seu fechamento, zelando pela segurança do paciente.



TYVEMED - ESTERILIZAÇÃO À BAIXA TEMPERATURA



TYVEK® – TYVEMED

Tyvek é um sistema de barreira estéril para esterilização a baixa temperatura por peróxido de hidrogênio. Os sistemas de Barreira Estéril de uso único são essenciais para garantir a segurança de produtos voltados para saúde. Neste contexto, apresentamos nosso Sistema de Barreira Estéril Medstéril, que oferece proteção física, permite uma esterilização eficiente, mantém a esterilidade até o momento de uso, e proporciona apresentação asséptica.

INDICADOR BIOLÓGICO E BOWIE E DICK

▶ INDICADOR BIOLÓGICO MEDTEST

Importante e tradicional método de monitoração dos ciclos de esterilização a vapor.

O IB **Medtest** é constituído por uma ampola contendo esporos do *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, que após participar do ciclo e incubado por 24 horas, oferece diagnóstico positivo ou negativo do processo.



▶ TESTE BOWIE E DICK

Teste que avalia imediatamente a eficiência da autoclave, monitorando os parâmetros de remoção de ar (vácuo), penetração do vapor, presença de gases não condensáveis, tempo e temperatura, oferecendo segurança para o início dos trabalhos diários, conferindo padrão de excelência à central de material.

Apresentação: pacote teste pronto e folha teste.



MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO

▶ INDICADORES E INTEGRADORES, TIPO 5 E 6

Produtos que monitoram as autoclaves, com rigor absoluto, os parâmetros críticos na esterilização. Desenvolvidos com tintas reativas sofisticadas tecnicamente, livres de chumbo, oferecem resultados altamente precisos, confiáveis e práticos, auxiliando a enfermagem a manter um alto padrão dos trabalhos na CME.



TIPO 5




TIPO 6

PACOTE DESAFIO COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 5


▶ DISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO (PCD)

Pacote contendo um indicador químico Tipo 5, para pronto uso, age como liberador de carga simulando uma condição crítica do processo de esterilização a vapor.

Os PCDs são usados para avaliar o desempenho do processo de esterilização a vapor, fornecendo um desafio igual ou maior do que o item mais difícil rotineiramente esterilizado

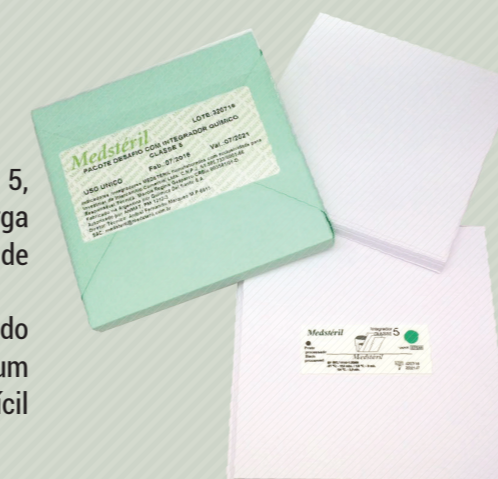

GUIA DE RESULTADOS

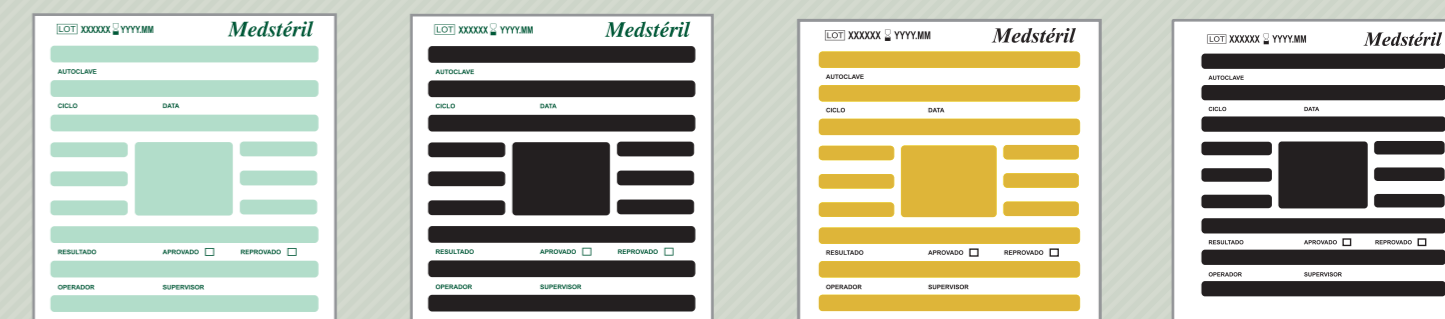

FOLHA REAGENTE INTERNA ANTES E APÓS EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA. PRODUTO LIVRE DE CHUMBO